

Tipo do Documento	MANUAL	MA.XXX.001 - Página X/X	
Título do Documento	Manual do Painel de Exames laboratoriais	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão: 1.0	

1. APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta o funcionamento painel de exames laboratoriais.

2. OBJETIVOS

Descreve o funcionamento do painel de exames laboratoriais, que mostra a listagem atualizada dos exames que estão com a situação “a coletar” e que precisam ser coletados, tanto pela equipe de enfermagem quanto pelo laboratório. Para as unidades fechadas, todos os exames com a situação a coletar serão coletados pela equipe interna e não pelo laboratório.

3. DESCRIÇÃO

Para visualizar o painel de exames laboratoriais e que precisam ser coletas, siga os passos abaixo:

- 1) Acesse o sistema ADShospitalar, disponível no seguinte endereço, utilizando o seu login e senha de acesso: <http://hospitalar.heufpel.com.br/>
- 2) Acesse o menu **Laboratório -> Painel de Exames laboratoriais**.
- 3) Selecione os filtros **tipo de coleta** (normal, urgente ou todas) e a **unidade funcional** (unidade de internação) e selecione a opção **Visualizar**.

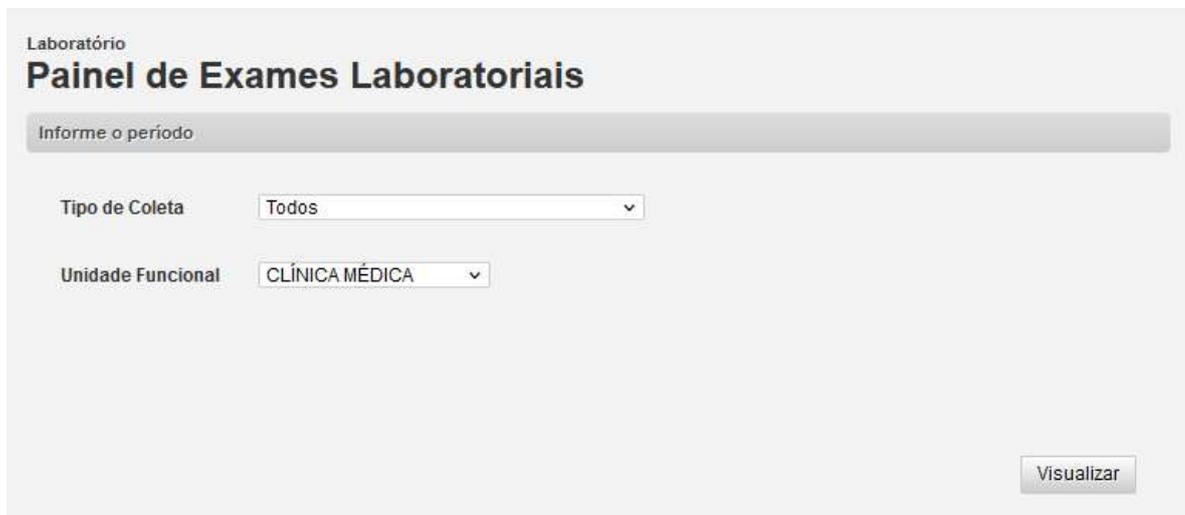


Figura 1 – Tela para acionar o Painel de Exames Laboratoriais

- 4) Sistema irá abrir a tela com a opção Iniciar. Clique nesta opção para abrir uma nova aba em tela cheia (figura 2).

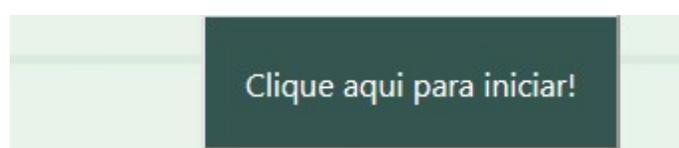


Figura 2 – Botão para iniciar

Tipo do Documento	MANUAL	MA.XXX.001 - Página X/X	
Título do Documento	Manual do Painel de Exames laboratoriais	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão: 1.0	

- 5) O sistema irá mostrar o painel, que é atualizado automaticamente a cada 5 minutos (figura 3).

Painel de Exames Laboratoriais: *Todos*

Listagem

<input type="checkbox"/>	Código	Unidade	Prontuário	Paciente	Nascimento	Exame	Material	Informações Clínicas	Data/Hora Programada	Tipo Coleta
<input type="checkbox"/>	149	CLÍNICA MÉDICA	660555	SOENY 3A 5E5BD 0055BE	22-04-1965	EXAME PARASITOLÓGICO	FEZES		04-08-2021 14:35	NORMAL
<input type="checkbox"/>	148	CLÍNICA MÉDICA	818757	JOAO 9B26B 0D6A5FF	18-01-1984	SUMÁRIO DE URINA	URINA		04-08-2021 16:00	NORMAL
<input type="checkbox"/>	174	CLÍNICA MÉDICA	818757	JOAO 9B26B 0D6A5FF	18-01-1984	ÁCIDO ÚRICO	URINA	informa	05-08-2021 14:00	NORMAL
<input type="checkbox"/>	196	CLÍNICA MÉDICA	818757	JOAO 9B26B 0D6A5FF	18-01-1984	HEMOGRAMA COMPLETO	SANGUE		05-08-2021 16:00	NORMAL
<input type="checkbox"/>	196	CLÍNICA MÉDICA	818757	JOAO 9B26B 0D6A5FF	18-01-1984	ÁCIDO ÚRICO	URINA DE 24 HORAS		05-08-2021 16:00	NORMAL
<input type="checkbox"/>	248	CLÍNICA MÉDICA	827972	ROSALINA 4D24D192 03 A8314	04-09-1955	ÁCIDO ÚRICO	SANGUE	TESTE	12-08-2021 17:00	NORMAL

Imprimir

© 2021

Figura 3 – Botão para iniciar

O painel utiliza o sinalizador em três cores para coletas do tipo normal:

- Verde: Até 1 (uma) hora a mais da data programada, a partir da data corrente.
- Amarelo: mais de 1 hora da data programada até 3 horas a mais da data programada, a partir da data corrente.
- Vermelho: mais de 3 horas da data programada, a partir da data corrente.

Importante: Para coletas do tipo urgente, será sempre mostrado na cor vermelha.

- 6) O usuário poderá selecionar todos os exames para impressão ou escolher alguns exames, clicando no botão Imprimir (figura 3). Caso não deseje imprimir, poderá acompanhar pela tela mesmo, ou utilizando um segundo monitor para facilitar a gestão das coletas.

4. REFERÊNCIAS

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	08/07/2021	Criação do documento.

(Poderão ser incluídas no quadro abaixo as identificações dos responsáveis pela elaboração/revisão e avaliação)

Elaboração: Nathalie Rey da Silva Aquino	Data: 12/08/2021
Análise:	Data:
Validação:	Data:
Aprovação:	Data:

Tipo do Documento	MANUAL	MA.XXX.001 - Página X/X	
Título do Documento	Manual do Painel de Exames laboratoriais	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão: 1.0	

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte